



Sigt efter stjernerne med StarzTipz®

farverig – alsidig – kan tilpasses – reducerer krydskontaminering



Vi hjælper dig med at identificere din trefunktionssprøjte og leverer et konverteringssæt (hvis det er nødvendigt) for at gøre skiftet til StarzTipz® så nemt som muligt.

			
Konverteringssæt Cefla Anthos F3/F6 QRNT1030	Konverteringssæt Cefla SP QRNT1035	Konverteringssæt Faro SM03 QRNT1100	Konverteringssæt Kavo Estetica QRNT1092
			
Konverteringssæt Kavo K4 QRNT1090	Konverteringssæt Luzzani Minibright QRNT1055	Konverteringssæt Luzzani Minilight QRNT1050	Konverteringssæt Luzzani Minimate QRNT1051
			Varenumrene henviser til StarzTipz®-adaptere.
Konverteringssæt Quick Release ADEC/UNIC QRNT1000	Konverteringssæt Sirona Sprayvit 4000 QRNT1071	Konverteringssæt Sirona Sprayvit C8 QRNT1070	

Find svarene på de oftest stillede spørgsmål om StarzTipz®. Vores mål er at give dig alle vigtige oplysninger hurtigt og tydeligt. Hvis du har yderligere spørgsmål, besvarer vi dem gerne personligt

01. Hvad er fordelene ved »Slx Air Core«-teknologien?

De seks luftkamre sikrer moderat tryk og god forstøvning. Det gør spidsen særligt velegnet til tørring af primer, bond, osv. Den originale spids giver også god adgang til det bageste molarområde, og den længere spids (95 mm) kan bøjes til vanskeligt tilgængelige bukkale eller lingualbehandlinger.

02. Hvad er det særlige ved HP-spidsen?


Med sin længde på 65 mm og dobbelte kamre giver High-Pressure (HP)-spidsen en kraftigere og mere fokuseret spray og er ideel til rengøring af dybe parodontallommer. Den er 30 mm kortere end den originale spids og er ideel til brug ved de yngre patienter og til at arbejde tæt på behandlingsstedet.

03. Fungerer denne spids på min trefunktionssprøjte?

Vi har en række omformere, der passer til mange trefunktionssprøjter.

04. Kan jeg virkelig være sikker på, at StarzTipz® garanterer en sikker adskillelse af luft og vand?

Hvis dit udstyr er i god stand, garanterer vi 100 % adskillelse af luft og vand. StarzTipz®-spidserne sidder godt fast i trefunktionssprøjten takket være O-ring-låsen. 99 % af lækageproblemerne skyldes slidte O-ringe, forkert montering af spidsen eller forsøg på at montere spidsen med en inkompatibel adapter.

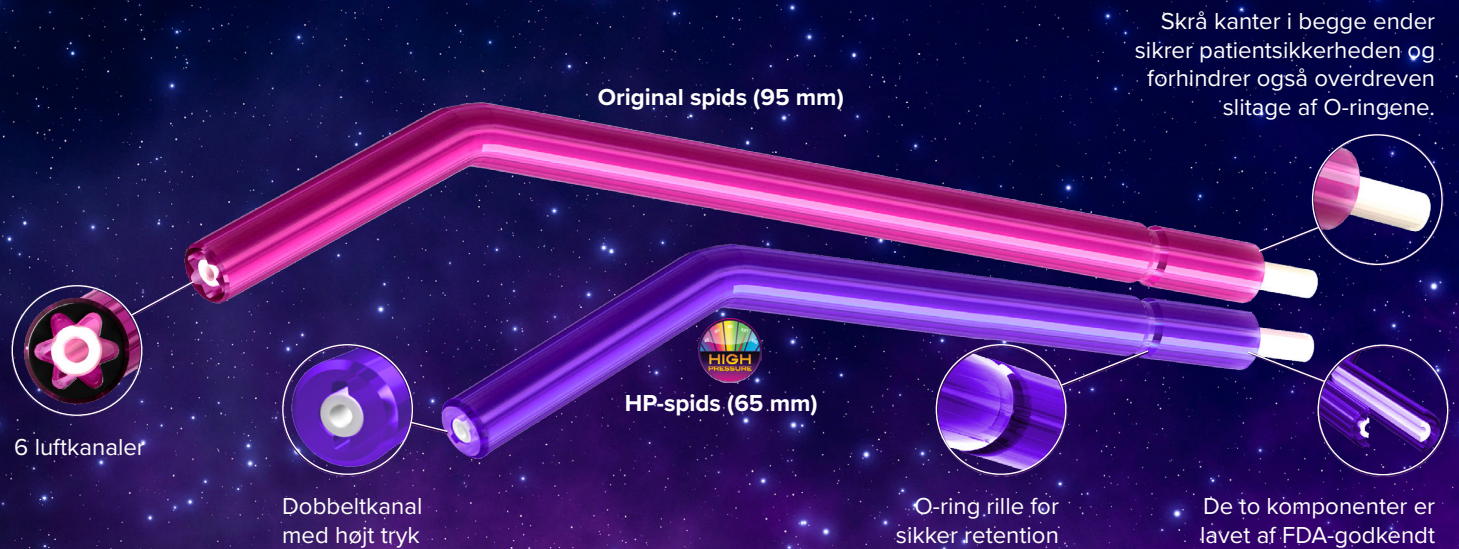

StarzTipz® vigtigste funktioner

- ★ Øjeblikkelig adskillelse af luft og vand
- ★ Fleksibel plast, bevarer sin form
- ★ Verdensomspændende kompatibilitet gennem matchende adaptersæt
- ★ Slankt design for optimal synlighed i mundhulen
- ★ Reduceret risiko for krydskontaminering

At skifte til StarzTipz® er nemmere, end du tror!

Vælg modellen på din trefunktionssprøjte, og find den rigtige adapter og det tilhørende O-ringssæt til at konvertere din unit til StarzTipz®.



Skift til
StarzTipz® nu!